

更清晰 精確的 IP 免疫沉澱 實驗結果




好評推薦

IP 實驗背景消除劑

取代原有二級抗體，讓免疫沉澱 (IP) 及免疫共沉澱 (Co-IP) 實驗結果判讀，不再受到樣本中抗體重鏈及輕鏈的干擾，使背景更乾淨清晰！

- **作用原理：**僅會辨識 Native (non-reduced) 抗體，因此不會受到加熱及 SDS 處理後，樣本中的 Denatured/reduced IgG 干擾。
- **抗體選擇不受限！**可使用相同一級抗體、或同物種來源的一級抗體進行 IP 和 WB 實驗。
- **使用方便！**僅需簡單以此試劑替換原有的二級抗體，無須更動實驗其他試劑或步驟。

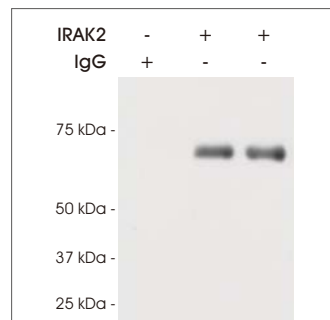

Immunoprecipitation of IRAK2 (ab6148), following use VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP) (ab131366).

	VeriBlot for IP Detection Reagent (HRP)	Anti-mouse IgG for IP (HRP)
訂購貨號 (包裝)	ab131366 (500 μ l)	ab131368 (100 μ l)
適用一級抗體物種	泛用型 Bovine IgG2 Goat IgG2 Human IgG1, IgG2, IgG4 Mouse IgG1*, IgG2a, IgG2b, IgG3 Rat IgG2C Rabbit Total IgG Sheep IgG2 <small>*Mouse IgG1 affinity may or may not be strong so it should be empirically tested.</small>	鼠類一抗專用 Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3

Protein A/G 膠體

- 共價鍵結穩定、低 leakage、顆粒均勻、可耐高流速，且具有良好化學耐受性。
- 優異的蛋白載量 (binding capacity)，可達 20-25 mg/ml (human IgG)。

Cat. No.	Product	Qty
ABT-PA09-10	Protein A Agarose Resin	10 ml
ABT-4RRPG-10	Protein G Agarose Resin	10 ml

Protein A/G 磁珠

- 具特殊超順磁性四氧化三鐵核心、加上葡聚糖 (Dextran) 表層，純化分離效果佳，且用量節省。
- 不須離心，流程快速便利且實驗再現性高。

Cat. No.	Product	Qty
MQ-MF-PRA-3000-10ML	Qbeads-Protein A	10 ml
MQ-MF-PRG-3000-10ML	Qbeads-Protein G	10 ml

